

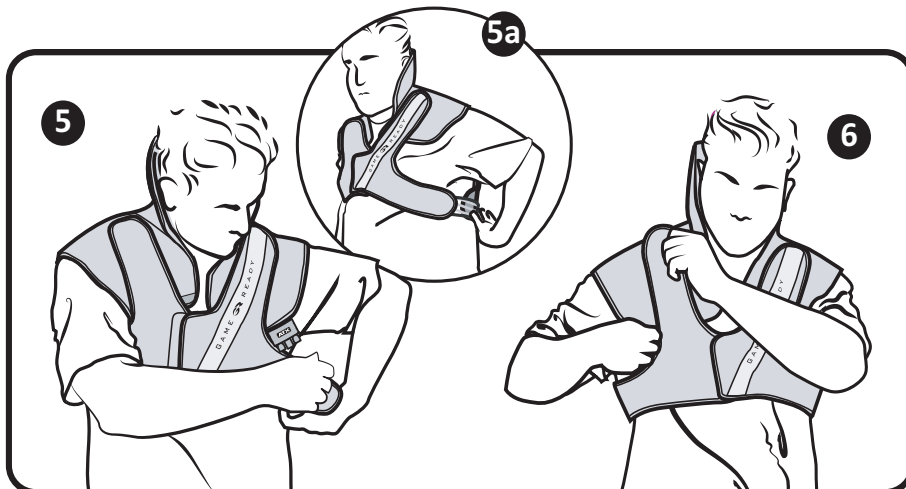
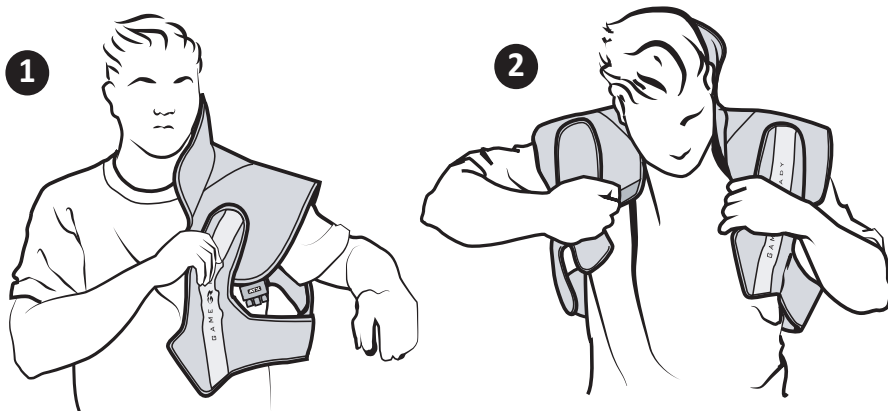
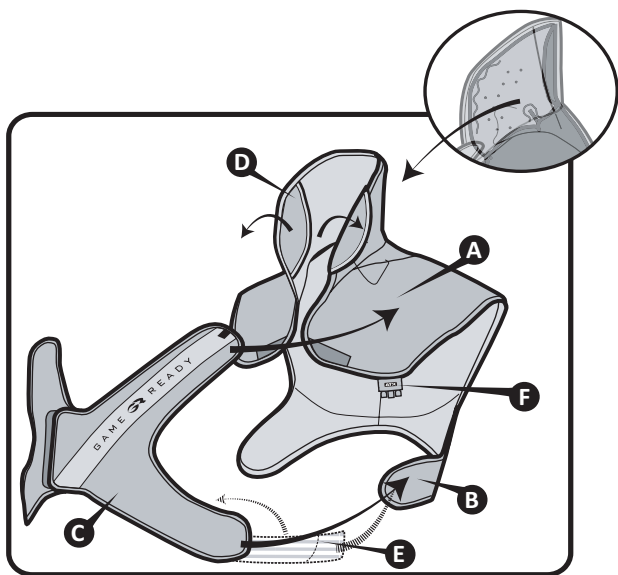


## C-T Spine

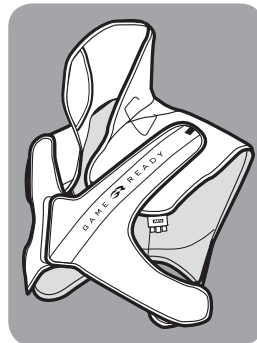

### Toepassing

1. Schuif één arm door de zwachtel.
  2. Schuif de andere arm door de andere kant van de zwachtel.
  3. Neem de schoudervleugels (A) vast en trek de zwachtel voorzichtig omlaag om een goed contact met de nek te waarborgen.
  4. Maak de haak- en lussluiting in het midden van de borst vast.
  5. Stel de twee zijriemen (B en C) aan beide kanten van het lichaam op gelijke lengte bij.
  - 5a. Met behulp van de elastische verlengbanden (E) aan weerszijden van de borstriemen kan de zwachtel worden aangepast aan verschillende lichaamsgrootten. Maak de zijriemen los, maak de elastische band aan de binnenkant los en bevestig de lus opnieuw in de richting van de achterkant van de zwachtel. Herhaal voor de andere kant.
  6. Stel de twee schouderriemen (A en C) bij door deze volledig los te haken en deze opnieuw aan te brengen over de borst en schouders. Zorg dat aansluiting (F) vrij blijft.
- Aan de bovenkant van de halskraag bevindt zich een isolatieflap (D). Als de kraag onder uw oren past, klap de isolatieflap dan naar buiten zodat het afkoelgebied wordt vergroot. Als de kraag uw oren bedekt, houd de isolatieflap dan ingestopt in de zwachtel.
  - Nadat de zwachtel goed passend is gemaakt, hoeft u de borstriemen normaal niet meer bij te stellen voor latere behandelingen. Haak de sluiting in het midden van de borst los en verwijder de zwachtel. Om deze opnieuw aan te brengen, schuift u de zwachtel aan als een vest en maakt u de haaksluiting in het midden van de borst vast.

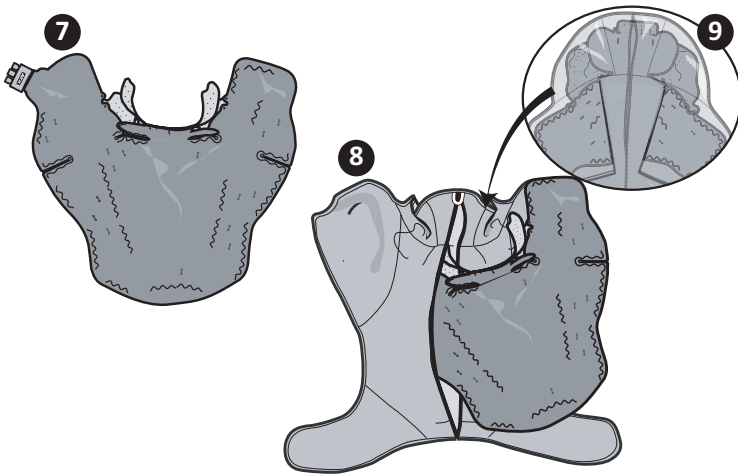

### In elkaar zetten

Leg de hoest met de ritssluiting omlaag op een vlak oppervlak en verwijder de borstriemen (C). Keer de hoest vervolgens om zodat de ritssluiting naar boven gericht is.

- Leg de warmtewisselaar plat neer, afzonderlijk van de buitenhoest.
- Breng de warmtewisselaar in de hoest in door de aansluiting door de opening (F) op de linkerschouder te voeren. De blauwe kant van de warmtewisselaar dient de blauwe kant van de hoest aan te raken.
- Zorg dat de warmtewisselaar op de rug en schouders plat binnen de hoest ligt. Om te zorgen dat de kraag goed ligt, draait u de schouder vleugels terug (A), en strijkt u de warmtewisselaar binnen de kraag vervolgens glad. Doe de ritssluiting van de hoest dicht en klap de zwachtel om met de schouder vleugels naar voren gericht. De zwachtel hoort op een vest met een hoge kraag te lijken. Maak de schouderriemen (C) vast om het in elkaar zetten te voltooiën en zorg daarbij dat het logo op de borstriemen in de richting wijst als afgebeeld.

### Belangrijk !

Deze zwachtel is bedoeld voor gebruik met lagedrukinstelling. De druk kan desgewenst worden uitgezet.

Lees deze volledige gebruikershandleiding en de gebruikershandleiding van het Game Ready-systeem door, inclusief de indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen voordat u dit product gebruikt.

### Contra-indicaties

Compressietherapie met het Game Ready-systeem of andere hulpmiddelen voor compressietherapie mag niet worden gebruikt bij patiënten:

- in de acute fasen van inflammatoire flebitis in het betrokken gebied;
- die op dit moment klinische tekenen vertonen die wijzen op diepveneuze trombose in het betrokken gebied;
- met significante arteriosclerose of andere ischemische vaatandoeningen in het betrokken gebied;
- met significante risicofactoren voor of actuele klinische tekenen van embolie (bijv. longembolie, herseninfarct, atriumfibrillatie, endocarditis, myocardiinfarct of atheromateuze embolische plaque);
- met een aandoening waarbij toegenomen veneuze of lymfatische terugstroming niet wenselijk is in de betrokken extremiteit (bijv. carcinoom);
- met gedecompenseerde hypertensie in het betrokken gebied.

Cryotherapie met behulp van het Game Ready-systeem of een ander cryotherapiehulpmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten:

- met significante aantasting van de vaten in het betrokken gebied (bijv. door voorafgaande bevroering, diabetes, arteriosclerose of ischemie);
- met bekende hematologische dyscrasieën die gevolgen hebben voor trombose (bijv. paroxysmale koude-hemoglobinurie, cryoglobulinemie, sikkelcelziekte, koude-agglutinen in serum).

### Waarschuwingen

Houd u aan de behandelingsadviezen van uw gezondheidszorgverlener betreffende de duur en frequentie van het gebruik van dit hulpmiddel.

Onjuiste plaatsing of langdurig gebruik van het Game Ready-systeem kan leiden tot weefselbeschadiging.

Tijdens de behandeling moeten patiënten de huid rondom het behandelde gebied en de vingers/tenen van de extremiteiten van het behandelde ledemaat (indien van toepassing) in de gaten houden om te zien of zich een branderig gevoel, jeuk, toegenomen zwelling of pijn voordoet. Als een van deze tekenen zich voordoet, of veranderingen in het uiterlijk van de huid (zoals blaren, toegenomen roodheid, verkleuring of andere opvallende veranderingen van de huid), worden patiënten geadviseerd om het gebruik te staken en een arts te raadplegen.

Game Ready-zwachtels zijn niet steriel; niet rechtstreeks op open wonden, zweren, uitslag, infecties of hechtingen aanbrengen. De zwachtel kan over kleding of een verband heen worden aangebracht.

Game Ready-zwachtels zijn verkrijgbaar in diverse configuraties, maar zijn niet bestemd voor alle mogelijke fysiologische toepassingen. Zo is de enkelzwachtel niet bestemd voor gebruik om de tenen en is de rugzwachtel niet bestemd voor gebruik in het buikgebied.

Per behandelingssessie niet langer dan 20 minuten ononderbroken gebruiken. Deze zwachtel wordt geleverd met een isolerende flap die naar wens kan worden geplaatst om overmatige afkoeling van de oren te voorkomen. Als u overmatige afkoeling of ongemak voelt, gebruik dan extra isolatie waar nodig of stel de temperatuur van de regelaar bij.

Volg de aanbevelingen van uw arts voor het juiste gebruik van de isolerende laag.

Compressiebehandeling met het Game Ready-systeem mag uitsluitend onder toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:


- met een open wond in het betrokken gebied (de wond moet worden verbonden vóór gebruik van Game Ready);
- met een acute, instabiele (onbehandelde) fractuur in het betrokken gebied;
- die jonger dan 18 zijn of die cognitieve stoornissen of communicatieproblemen hebben, ongeacht of dit tijdelijk is (als gevolg van medicatie) of blijvend;
- met hartinsufficiëntie of congestief hartfalen (met gerelateerd oedeem in de extremiteiten of longen);
- met een plaatselijke instabiele huidafdoening (bijv. dermatitis, ligatuur van een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
- met erysipelas of een andere actieve infectie in het betrokken gebied.

Cryotherapie met het Game Ready-systeem mag uitsluitend onder toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:

- met ziekte van Raynaud of overgevoeligheid voor koude (koude-urticaria);
- met hypertensie of een extreem lage bloeddruk;
- met diabetes;
- met een verminderde plaatselijke bloedsomloop of een neurologische stoornis (waaronder paralyse of plaatselijke stoornis als gevolg van meerdere operatieve ingrepen) in het betrokken gebied;
- met een plaatselijke instabiele huidafdoening (bijv. dermatitis, ligatuur van een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
- met reumatoïde artritis in het betrokken gebied.

### Opmerkingen

Breng de zwachtel gelijkmatig nauw passend aan, waarbij u zorgt dat zich geen knikken voordoen die de waterstroming kunnen belemmeren. Zorg dat de verbindingsslang zodanig wordt geplaatst dat wordt voorkomen dat de zwachtel wordt geplooid of geknikt in het gebied van de zwachtel met de slanginlaat.

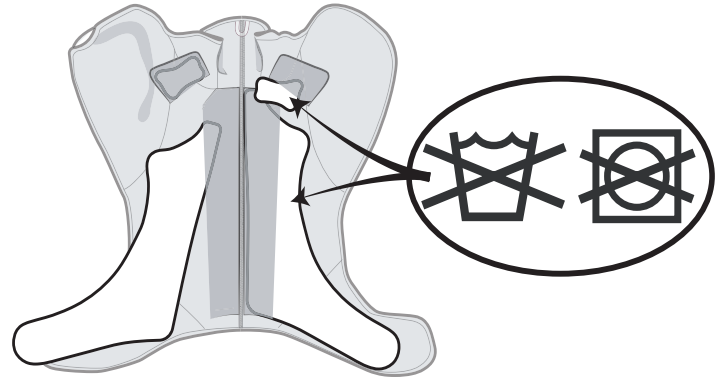

### Onderhoud en reiniging

Voor dagelijks onderhoud en om schimmelvorming te minimaliseren verwijdert u de warmtewisselaar uit de hoest en veegt u hem af met een droge handdoek om eventueel gevormde condensatie te verwijderen. Keer de hoest binnenstebuiten en hang de hoest en de warmtewisselaar allebei op om overtollig vocht te laten weglopen. Voor uitgebreid onderhoud verwijdert u de warmtewisselaar en alle vier de plastic steunen (2 hals, 2 rug) voorzichtig van de hoest en keert u de hoest binnenstebuiten. Was de hoest met de hand of in een machine met koud water en een mild reinigingsmiddel, of met antibacteriële zeep. Hang op om te drogen. Neem de warmtewisselaar uitsluitend af met warm water en een mild reinigingsmiddel; niet in een wasmachine wassen of in een droogtrommel plaatsen. Hang op om te drogen. Plaats de plastic steunen terug op de hoest voordat u de zwachtel gebruikt. Voor gebruik bij meerdere patiënten kan op de warmtewisselaar en/of de hoest Sterifab® worden gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant teneinde de overdracht van bacteriën te minimaliseren.

### Gemiddelde verwachte levensduur

De levensduur van hoezen en warmtewisselaars is sterk afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Zie het onderstaande overzicht om te bepalen wanneer het product moet worden vervangen.

#### Hoes

|  |            |
|--|------------|
| Licht gebruik (persoonlijk)                    | 12 maanden |
| Matig gebruik                                  | 6 maanden  |
| Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling) | 3 maanden  |

#### Warmtewisselaar

|  |            |
|--|------------|
| Licht gebruik (persoonlijk)                    | 24 maanden |
| Matig gebruik                                  | 18 maanden |
| Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling) | 12 maanden |

### Garantie-informatie

Hoes: Bij een fabricagefout kan de hoest binnen 7 dagen na aankoop worden geretourneerd. Warmtewisselaar: 1 jaar na de aankoopdatum. Zie de bij de warmtewisselaar gevoegde garantietaal.

### Contact opnemen

In de VS belt u de klantenservice van Game Ready op 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100). Buiten de VS kijkt u op [www.gameready.com](http://www.gameready.com) om de contactgegevens van de plaatselijke distributeur te vinden.

Een lijst met informatie over voor Game Ready-technologie verleende octrooien is te vinden op: [www.gameready.com/patents](http://www.gameready.com/patents).



Symbool voor 'geassembleerd in' een bepaald land (XXXX).



Symbool voor 'vervaardigd in' een bepaald land (XXXX).

COOLSYSTEMS®, INC.  
1800 Sutter Street, Suite 500  
Concord, CA 94520 USA  
1.888.GAMEREADY +1.510.868.2100  
[www.gameready.com](http://www.gameready.com)

