



**使用**

1. 解开一边下巴托。
2. 把帽子戴在头顶上，然后调节帽子前面的钩环封闭罩至舒适位置。
3. 下巴托的一边是固定的，往下拉，包住下巴。将下巴托的另一边插入耳套圈，然后扣紧钩环封闭罩 (3a)。下巴托中间最宽的部位应与下巴正中央贴合 (3b)。不可将下巴托戴在脖子上 (3c)。

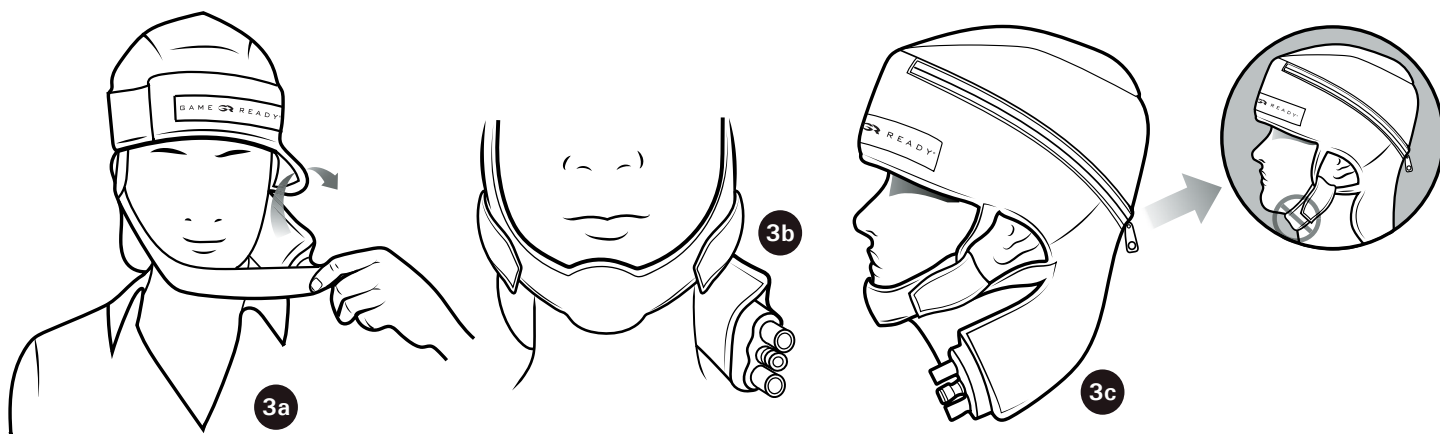


包裹绷带配有耳部和前额保温层。要使用包裹绷带的保温功能，将热交换器下面的泡沫层塞进所需区域。使用包裹绷带如不需要保温，要让耳部和前额散热更快，则把泡沫层放在热交换器上面的所需区域 (A)。

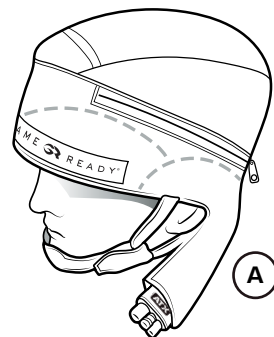


**组装**

1. 将套筒放在平处，带拉锁侧朝上，GR 徽章朝向身体。
2. 将热交换器放在平处，和外套筒分开，蓝色面朝下。


- 抽出热交换器的两个长翼片，将它们交叠 (3a)。将两片交叠的翼片塞进套筒的中间口袋，即可把热交换器插入套筒 (3b)。热交换器的蓝色面应与套筒蓝色面接触。

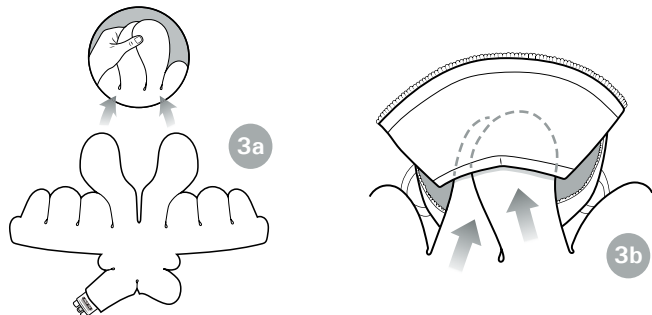

- 将 ATX 接头穿过套筒侧面的接头开口。把护颈塞进接头对面的口袋里。

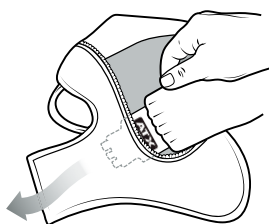

- 交叠热交换器一侧的 3 片翼片 (5a)。将翼片插入套筒对应的侧翼固定处。翼片在固定处可保持交叠 (5b)。

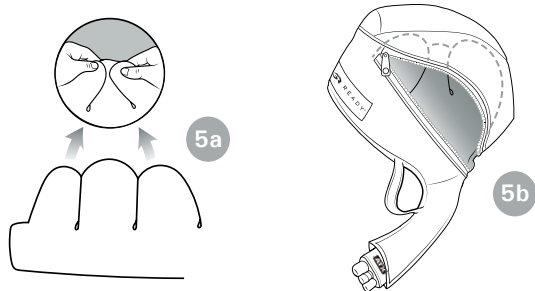

- 第一组翼片固定后，扣上套筒另一边即可固定热交换器。重复前一步骤组装另一边包裹绷带。
- 完全扣上套筒，确保热交换器在套筒内贴平，无扭结或褶皱。合上前额钩环封闭罩。
- 将下巴托的一端穿过耳套圈，扣上下巴托外面的环扣。

### 重要 ⚠️

此包裹绷带适合在低压设置下使用。可根据需要关闭压力。使用本产品前，请完整阅读此用户手册和 Game Ready 系统用户手册，包括各种适应症、禁忌症、注意事项和警告。

### 禁忌症

利用 Game Ready 系统的加压治疗或任何加压治疗器械不得用于以下患者：

- 受影响区域处于炎症性静脉炎急性期的患者。
- 在受影响区域提示有深静脉血栓形成的任何目前临床症状的患者。
- 在受影响区域有明显的动脉硬化或其他血管缺血性疾病的患者。
- 有栓塞的任何显著危险因素或目前临床症状 (例如肺栓塞、脑梗塞、心房颤动、心内膜炎、心肌梗死或动脉粥样斑块) 的患者。
- 在受影响的肢体中有不希望的静脉或淋巴回流加重 (比如，癌) 情况的患者。
- 在受影响区域有代偿失调压力过高的患者。

利用 Game Ready 系统的冷疗或任何冷疗器械不得用于以下患者：

- 在受影响区域 (比如，从先前冻伤、糖尿病、动脉硬化或局部缺血) 有明显血管损伤的患者。
- 有已知影响血栓形成的血液恶液质 (如阵发性冷性血红蛋白尿、冷球蛋白血症、镰状细胞病和血清冷凝集素) 的患者。

### 警告

本器械的使用持续时间和频率，请听从您的保健医师的建议。

Game Ready 系统放置不当或延长时间使用，可导致组织损伤。

在治疗期间，患者应监视治疗区域和治疗肢体末端 (如适用) 周围皮肤的任何灼伤、瘙痒、肿胀加重或疼痛。如果存在这些症状中的任一症状，或皮肤外观发生任何变化 (比如，水泡、红肿加重、变色或皮肤的其他明显变化)，建议患者停止使用并咨询医生。

Game Ready 包裹绷带不是无菌；切勿直接对着开放性伤口、溃疡、皮疹、感染或拆线放置。包裹绷带可施加在衣服或敷料上面。

Game Ready 包裹绷带有多种配置可供选择，但并不适用于所有可能的生理用途。例如，脚踝包裹绷带不适用于脚趾，背部包裹绷带不适用于腹部区域。

对于高血压患者，应在开始散热时和治疗结束后要监测血压  
每次治疗连续使用的时间不可超过 20 分钟。

此包裹绷带有保温层，可根据需要使用，可预防耳部和前额部过凉。如果感觉太凉或不舒服，可根据需要加以保温或调节控制器温度。

听从医师的建议正确使用保温层。

用 Game Ready 系统加压治疗，应仅在执业保健医师监督下用于以下患者：

- 在受影响区域有开放性伤口 (使用 Game Ready 之前，必须包扎伤口) 的患者。
- 在受影响区域有急性、不稳定性 (未处理) 骨折的患者。
- 18 岁以下的儿童或有认知障碍或交流障碍，无论是暂时性 (由于药物) 或永久性的患者。
- 患有心功能不全或充血性心力衰竭 (与四肢或肺水肿有关) 的患者。
- 有局部不稳定的皮肤情况 (例如，皮炎、静脉结扎术、坏疽或近期植皮) 的患者。
- 在受影响的区域有丹毒或其他活动性感染。

用 Game Ready 系统冷疗，应在执业保健医师监督下只用于以下患者：

- 患有雷诺氏病或冷超敏性 (寒冷性荨麻疹) 的患者。
- 患有高血压或极低血压的患者。
- 患有糖尿病的患者。
- 在受影响区域的局部循环受累或神经功能损伤 (包括麻痹或由于多次手术的局部受损) 的患者。
- 有局部不稳定的皮肤情况 (例如，皮炎、静脉结扎术、坏疽或近期植皮) 的患者。
- 在受影响区域患有类风湿性关节炎的患者。

### 备注

使用时确保包裹绷带与头部紧密贴合无缝隙，没有可能妨碍水流的扭结。

确保接好接头软管，防止包裹绷带软管入口处折叠或扭结。

### 保养和清洁

进行日常保养时，为尽量防止发霉，断开热交换器和套筒，用干毛巾擦干擦掉可能残留的凝结物。外翻套筒，然后悬挂套筒和热交换器，让多余水分流出。

进行深度保养时，小心断开热交换器和套筒，然后将套筒外翻。用冷水加温和清洁剂或抗菌肥皂手洗或机洗套筒。悬挂干燥。用温水和温和清洁剂擦拭热交换器，不可机洗或用干燥器干燥。悬挂干燥。

对于多用户使用，可按照热交换器和/或套筒上的厂商使用说明使用 Sterifab®，尽量避免微生物传播。

### 平均使用寿命

套筒和热交换器的使用寿命在很大程度上取决于其使用频率。请参照下表确定何时需要更换产品。

#### 套筒

不经常使用 (个人使用)	12 个月
一般频率使用	6 个月
高频率使用 (用于临床或培训机构)	3 个月

#### 热交换器

不经常使用 (个人使用)	24 个月
一般频率使用	18 个月
高频率使用 (用于临床或培训机构)	12 个月

### 保修信息

套筒：如果出现制造缺陷，套筒可在购买之日起 7 日内退货。

热交换器：购买之日起 1 年内。请详见热交换器附带的保修卡。

### 联系我们

在美国，请拨打 Game Ready 客服电话 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100)。在美国境外，请访问 [www.gameready.com](http://www.gameready.com) 查找您当地经销商的联系信息

涵盖 Game Ready 技术的现行专利清单可以在以下网站找到：  
[www.gameready.com/patents](http://www.gameready.com/patents)。



一个特定国家“装配”的符号(XXXX)。

一个特定国家“制造”的符号(XXXX)。

COOLSYSTEMS® INC.  
1800 Sutter Street, Suite 500  
Concord, CA 94520 USA  
1.888.GAMEREADY +1.510.868.2100  
[www.gameready.com](http://www.gameready.com)



©2016 CoolSystems, Inc. All Rights Reserved.  
Game Ready Dual Action Wrap User Manual  
Cryo Cap PN 704256 Rev A

EMERGO EUROPE  
Molenstraat 15  
2513 BH, The Hague  
The Netherlands