

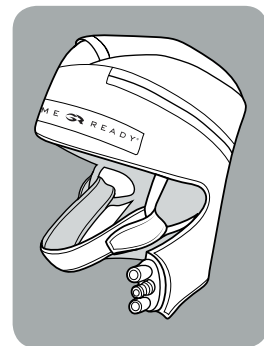
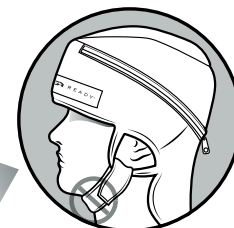


Cryo Cap

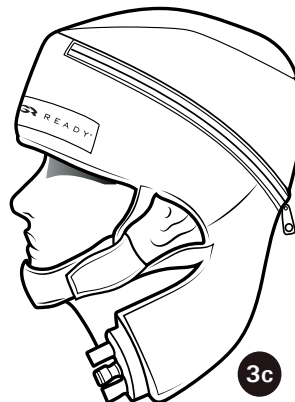


Toepassing

1. Maak de kinband aan één kant los.
2. Plaats de hoofdkap op het hoofd en pas de haak- en bandsluiting aan aan de voorkant van de kap aan voor een comfortabele pasvorm.
3. Met de kinband aan één kant vast, trek het naar beneden rond de voorzijde van de kin. Voer de andere zijde van de kinband in de oorband en maak haak- en bandsluiting vast (3a). Het middelste, breedste gedeelte van de kinband moet in lijn met het midden van de kin zijn (3b). De kinband moet niet op de hals gedragen worden (3c).

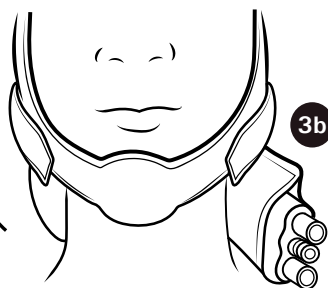


Deze zwachtel komt met isolerende lagen voor de oren en het voorhoofd. Om de isolatie van de wrap te gebruiken, stopt u de lagen onder de warmtewisselaar op de gewenste plek(ken). Om de zwachtel zonder isolatie te gebruiken, en om in meer afkoeling van de oren en/of het voorhoofd te voorzien, leg dan de bovenkant van de warmtewisselaar op de gewenste plek(ken) (A).

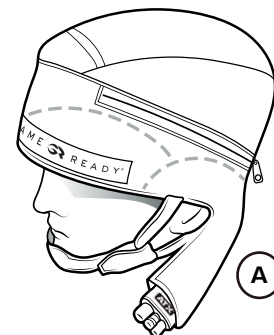


In elkaar zetten

1. Leg de hoes met de ritssluiting naar boven op een vlakke ondergrond en met de GR-badge (Game Ready-badge) naar u toe gericht.
2. Plaats de warmtewisselaar op een vlakke ondergrond, apart van de buitenste hoes, met de blauwe kant naar beneden.


3. Neem de twee lange, bovenste gedeeltes van de warmtewisselaar en leg ze op elkaar (3a). Met de gedeeltes op elkaar liggend, voer de warmtewisselaar in de hoes door de twee op elkaar liggende gedeeltes in de middelste zak van de hoes te schuiven (3b). De blauwe kant van de warmtewisselaar dient de blauwe kant van de hoes aan te raken.

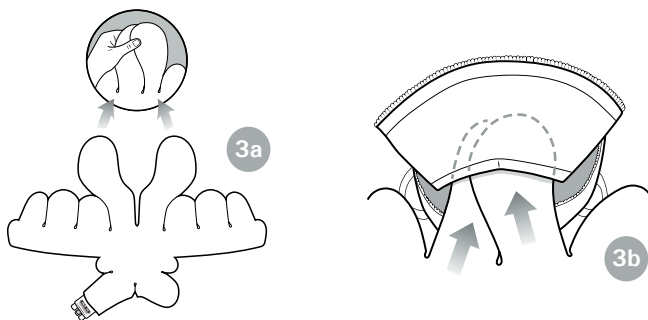

4. Voer de ATX-connector door de connector-opening aan de zijkant van de hoes. Stop het halslapje in de zak tegenover de connector.

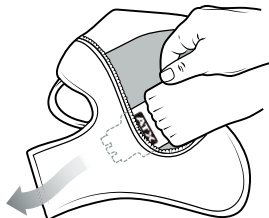

5. Leg de 3 vleugelachtige gedeeltes aan één kant van de warmtewisselaar (5a). Voer de vleugelachtige gedeeltes in de bijbehorende zijvleugelruimte van de hoes. De vleugels blijven op elkaar in de voorziene ruimte (5b).

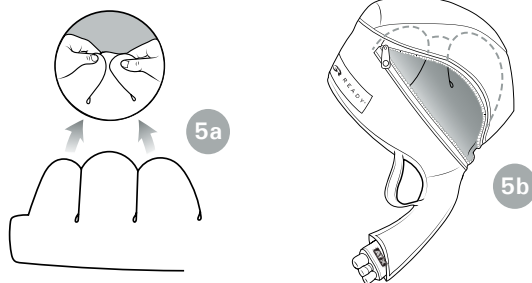

6. Wanneer de eerste vleugels op hun plaats zitten, sluit dan de rits aan de kant van de hoes om de warmtewisselaar op zijn plaats te houden. Herhaal de vorige stap voor het tegenovergelegen gedeelte van de zwachtel.
7. Sluit de hoes volledig, terwijl u zich ervan vergewist dat de warmtewisselaar plat in de hoes ligt zonder buigingen of vouwen. Maak de haak- en bandsluiting op het voorhoofd vast.
8. Voer een zijde van de kinband door de oorband en maak de tab aan de buitenkant van de kinband vast.

Belangrijk

Deze zwachtel is bedoeld voor gebruik met lagedrukinstelling. De druk kan desgewenst worden uitgezet.

Lees deze volledige gebruikershandleiding en de gebruikershandleiding van het Game Ready-systeem door, inclusief de indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen voordat u dit product gebruikt.

Contra-indicaties

Compressietherapie met het Game Ready-systeem of andere hulpmiddelen voor compressietherapie mag niet worden gebruikt bij patiënten:

- bij wie het betrokken gebied is aangedaan door de acute fasen van flebitis;
 - die op dit moment klinische tekenen vertonen die wijzen op diep-veneuze trombose in het betrokken gebied;
 - met significante arteriosclerose of andere ischemische vaatandoeningen in het betrokken gebied;
 - met significante risicofactoren voor of actuele klinische tekenen van embolie (bijv. longembolie, herseninfarct, atriumfibrillatie, endocarditis, myocardinfarct of atheromateuze embolische plaque);
 - met een aandoening waarbij toegenomen veneuze of lymfatische terugstroming niet wenselijk is in de betrokken extremiteit (bijv. carcinoom);
 - met gedecompenseerde hypertonie in het betrokken gebied.
- Cryotherapie met behulp van het Game Ready-systeem of een ander cryotherapiehulpmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten:
- met significante aantasting van de vaten in het betrokken gebied (bijv. door voorafgaande bevroering, en diabetes, arteriosclerose of ischemie);
 - met bekende hematologische dyscrasieën die gevolgen hebben voor trombose (bijv. paroxysmale koude-hemoglobulinurie, cryoglobulinemie, sikkelcelziekte, koude-agglutinen in serum).

Waarschuwingen

Houd u aan de behandelingsadviezen van uw gezondheidszorgverlener betreffende de duur en frequentie van het gebruik van dit hulpmiddel.

Onjuiste plaatsing of langdurig gebruik van het Game Ready-systeem kan leiden tot weefselbeschadiging.

Tijdens de behandeling moeten patiënten de huid rondom het behandelde gebied en de vingers/tenen van de extremiteiten van het behandelde ledemaat (indien van toepassing) in de gaten houden om te zien of zich een branderig gevoel, jeuk, toegenomen zwelling of pijn voordoet. Als een van deze tekenen zich voordoet, of veranderingen in het uiterlijk van de huid (zoals blaren, toegenomen roodheid, verkleuring of andere opvallende veranderingen van de huid), worden patiënten geadviseerd om het gebruik te staken en een arts te raadplegen.

Game Ready-zwachtels zijn niet steriel; niet rechtstreeks op open wonden, zweren, uitslag, infecties of hechtingen aanbrengen. De zwachtel kan over kleding of een verband heen worden aangebracht.

Game Ready-zwachtels zijn verkrijgbaar in diverse configuraties, maar zijn niet bestemd voor alle mogelijke fysiologische toepassingen. Zo is de enkelzwachtel niet bestemd voor gebruik om de tenen en is de rugzwachtel niet bestemd voor gebruik in het buikgebied.

De bloeddruk moet worden gecontroleerd bij het beginnende afkoeling en aan het eind van een behandelingssessie bij patiënten die hypertensie hebben.

Per behandelingssessie niet langer dan 20 minuten aaneengesloten gebruiken.

Deze zwachtel wordt geleverd met een isolerende lagen die naar wens kan worden geplaatst om overmatige afkoeling van de oren en/of voorhoofd te voorkomen. Als u overmatige afkoeling of ongemak voelt, gebruik dan extra isolatie waar nodig of stel de temperatuur van de regelaar bij.

Volg de aanbevelingen van uw arts voor het juiste gebruik van de isolerende laag.

Compressiebehandeling met het Game Ready-systeem mag uitsluitend onder toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:

- met een open wond in het betrokken gebied (de wond moet worden verbonden vóór het gebruik van Game Ready);
 - met een acute, instabiele (onbehandelde) fractuur in het betrokken gebied;
 - die jonger dan 18 zijn of die cognitieve stoornissen of communicatieproblemen hebben, ongeacht of dit tijdelijk van aard is (vanwege medicatie) of blijvend;
 - met hartinsufficiëntie of congestief hartfalen (met hieraan verbonden oedeem in de extremiteiten of longen);
 - met een plaatselijke instabiele huidaandoening (bijv. dermatitis, ligatuur van een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
 - met erysipelas of een andere actieve infectie in het betrokken gebied.
- Cryotherapie met het Game Ready-systeem mag uitsluitend onder toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:
- met ziekte van Raynaud of overgevoeligheid voor koude (koude-urticaria);
 - met hypertensie of een extreem lage bloeddruk;
 - met diabetes;
 - met een aangetaste plaatselijke bloedsomloop of een neurologische aandoening (waaronder paralyse of plaatselijke aantasting ten gevolge van meerdere operatieve ingrepen) in het betrokken gebied;
 - met een plaatselijke instabiele huidaandoening (bijv. dermatitis, ligatuur van een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
 - met reumatoïde artritis in het betrokken gebied.

Opmerkingen

Breng de zwachtel gelijkmatig nauw passend aan, waarbij u zorgt dat zich geen knikken voordoen die de waterstroming kunnen belemmeren.

Zorg dat de verbindingsslang zodanig wordt geplaatst dat wordt voorkomen dat de zwachtel wordt geplooid of geknikt in het gebied van de zwachtel met de slanginlaat.

Onderhoud en reiniging

Voor dagelijks onderhoud en om schimmelvorming te minimaliseren verwijderd u de warmtewisselaar uit de hoes en veegt u hem af met een droge handdoek om eventueel gevormde condensatie te verwijderen. Keer de hoes binnenstebuiten en hang de hoes en de warmtewisselaar allebei op om overtollig vocht te laten weglopen.

Voor een langere levensduur verwijderd u de warmtewisselaar voorzichtig uit de hoes en keert u de hoes binnenstebuiten. Was de hoes met de hand of in een machine met koud water en een mild reinigingsmiddel, of met antibacteriële zeep. Hang op om te drogen. Neem de warmtewisselaar uitsluitend af met warm water en een mild reinigingsmiddel; niet in een wasmachine wassen of in een droogtrommel plaatsen. Hang op om te drogen.

Voor gebruik bij meerdere patiënten kan op de warmtewisselaar en/of de hoes Sterifab® worden gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant teneinde de overdracht van bacteriën te minimaliseren.

Gemiddelde verwachte levensduur

De levensduur van hoezen en warmtewisselaars is sterk afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Zie het onderstaande overzicht om te bepalen wanneer het product moet worden vervangen.

Hoes

Licht gebruik (persoonlijk)	12 maanden
Gemiddeld gebruik	6 maanden
Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling)	3 maanden

Heat Exchanger

Licht gebruik (persoonlijk)	24 maanden
Gemiddeld gebruik	18 maanden
Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling)	12 maanden

Garantie-informatie

Hoes: Bij een fabricagefout kan de hoes binnen 7 dagen na aankoop worden geretourneerd.

Warmtewisselaar: 1 jaar na de aankoopdatum. Zie de bij de warmtewisselaar gevoegde garantiekaart.

Contact opnemen

In de VS belt u de klantenservice van Game Ready op 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100). Buiten de VS kijkt u op www.gameready.com om de contactgegevens van de plaatselijke distributeur te vinden

Een lijst met informatie over voor Game Ready-technologie verleende octrooien is te vinden op: www.gameready.com/patents.



Symbool voor "geassembleerd in" een bepaald land (XXXX)



Symbool voor "vervaardigd in" een bepaald land (XXXX)

 COOLSYSTEMS® INC.
1800 Sutter Street, Suite 500
Concord, CA 94520 USA
1.888.GAMEREADY +1.510.868.2100
www.gameready.com



©2016 CoolSystems, Inc. All Rights Reserved.
Game Ready Dual Action Wrap User Manual
Cryo Cap PN 704259 Rev A

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands