


GAME
READY®

ATX®

VOOR GEBRUIK MET
GAME READY
GRPRO® 2.1-SYSTEEM

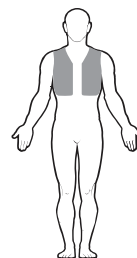

KOELVEST

GEBRUIKERSHANDLEIDING


NEDERLANDS

IN ELKAAR ZETTEN

De warmtewisselaar past in de hoes en zit al in elkaar. Als de warmtewisselaar wordt verwijderd om de hoes te wassen of om een andere reden, dient u de warmtewisselaar opnieuw in de hoes te plaatsen volgens onderstaande instructies.


1

Leg de hoes volledig open en plat met de blauwe zijde omlaag. De voorpanden moeten van u weg gericht zijn zoals in de afbeelding.

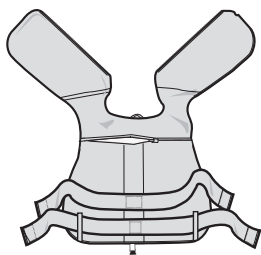

2

Plaats de warmtewisselaar in dezelfde oriëntatie, met de blauwe zijde omlaag.

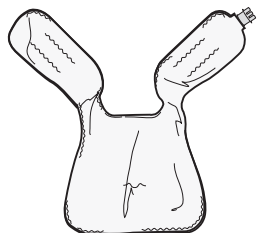

WAARSCHUWING

Het is verplicht om de gebruikershandleiding van het Game Ready GRPro 2.1-systeem volledig te lezen en te begrijpen voordat u het hulpmiddel in gebruik neemt. Als de bedieningsinstructies niet worden opgevolgd, kan dat leiden tot ernstig letsel.




BELANGRIJK

Lees de volledige indicaties, contra-indicaties, aandachtspunten en waarschuwingen voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar dit document voor later gebruik.

3

Trek de horizontale ritssluiting aan de achterkant van de hoes open. Plaats de warmtewisselaar in de hoes en zorg daarbij dat de oriëntatie overeenkomt (blauw tegen blauw). Zorg dat de warmtewisselaar in de hoes zit zonder plooiën of kreuken die de waterstroom door de kanalen van de warmtewisselaar zouden kunnen blokkeren. Trek de ritssluiting achteraan dicht. Het koelvest is klaar voor gebruik.

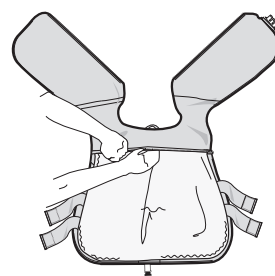

DE WARMTEWISSELAAR VERWIJDEREN


1. Koppel de verbindingsslang los van het koelvest.
2. Trek de ritssluiting achteraan open.
3. Trek de warmtewisselaar voorzichtig naar buiten.

HET KOELVEST OPBERGEN

Hang het koelvest op een brede klerhanger of leg het plat. Vouw of stapel het vest niet omdat er hierdoor knikken in de vloeistofkamer kunnen komen, met als gevolg dat het vest niet naar behoren werkt.

HET KOELVEST OPSTELLEN

Alvorens het vest aan te trekken, let u op de verticale klittenbandstrook tussen de ritssluiting achteraan en de taille. De riemen kunnen vanuit deze locatie in de hoogte worden versteld. Om te beginnen, kunt u de bovenste riem zo laag mogelijk plaatsen en de riem daarna verstellen voor een comfortabel en goed zittend vest. De riemen mogen enigszins overlappen. U dient wellicht een aantal keren te proberen totdat het vest naar wens past.

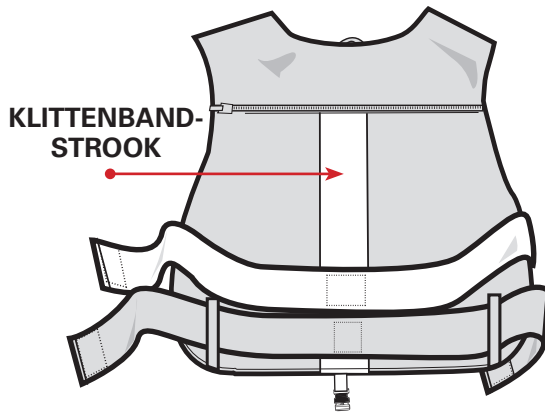

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Maak het koelvest gereed aan de hand van de volgende stappen:

- Selecteer "Off" (uit) (No Pressure [geen druk]) op het GRPro 2.1-regelapparaat.
- Bevestig de verbindingsslang aan het regelapparaat en het koelvest.
- Leg het koelvest open en plat naast of lager dan het regelapparaat (niet op het lichaam).
- Laat het systeem 2 minuten draaien.

HET KOELVEST AANTREKKEN



1 Trek het koelvest aan zoals u dat zou doen met elk ander bovenkledingstuk. Trek de ritssluiting dicht. De elastische zijriemen moeten aan de zijkant bevestigd blijven om ze gemakkelijk te kunnen verstellen.



2 Gebruik beide handen om de uiteinden van de elastische riemen vast te houden en pas het vest voorzichtig aan zodat het strak om het lichaam zit.



Het verdient aanbeveling de bovenste riemen vanaf de rug over de bovenkant van de borst opwaarts te buigen en ze niet horizontaal onder de armen te leiden. Dit voorkomt dat het vest omhoogkruipt.



3 Bevestig het uiteinde van de verbindingsslang aan de verbindingspoort van het vest door de twee stukken stevig recht in elkaar te steken. U dient een klik te horen. De verbindingsslang moet zodanig zijn georiënteerd dat de loskoppelknop weg van uw lichaam is gericht.

De optionele veiligheidslus kan worden gebruikt om de slang desgewenst vanaf de voorzijde van het vest naar de achterzijde te draperen.

4 Steek het andere uiteinde van de verbindingsslang in de poort op het eindpaneel van het regelapparaat. Om de slang los te koppelen, drukt u op de rode knop en trekt u de slang recht uit het regelapparaat.

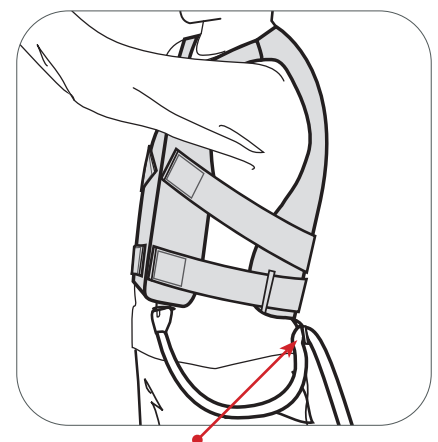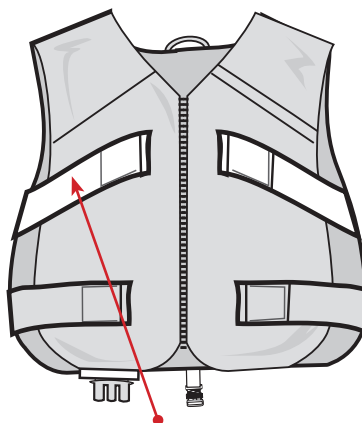



VOOR GEBRUIK MET

GAME READY GRPRO 2.1-SYSTEEM

ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

Compressietherapie met het Game Ready GRPro 2.1-systeem of een ander hulpmiddel voor compressietherapie mag niet worden gebruikt bij patiënten:

- bij wie het betrokken gebied is aangedaan door de acute fasen van flebitis;

- die op dit moment klinische tekenen vertonen die wijzen op diep-veneuze trombose in het betrokken gebied;
- met significante arteriosclerose of andere ischemische vaatandoeningen in het betrokken gebied;
- met significante risicofactoren voor of actuele klinische tekenen van embolie (bijv. longembolie, herseninfarct, atriumfibrillatie, endocarditis, myocardinfaarct of atheromateuze embolische plaque);
- met een aandoening waarbij toegenomen veneuze of lymfatische terugstroming niet wenselijk is in de betrokken extremiteit (bijv. carcinoom);
- met gedecompenseerde hypertonie in het betrokken gebied.

Cryotherapie met het Game Ready GRPro 2.1-systeem of een ander cryotherapiehulpmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten:

- met significante aantasting van de vaten in het betrokken gebied (bijv. door voorafgaande bevrozing, en diabetes, arteriosclerose of ischemie);
- met bekende hematologische dyscrasieën die gevolgen hebben voor trombose (bijv. paroxysmale koude-hemoglobinurie, cryoglobulinemie, sikkelcelziekte, koude-agglutinenen in serum).

Waarschuwing: Om te voldoen aan California Proposition 65 is de volgende waarschuwing opgenomen: Dit product bevat chemische stoffen waarvan bij de staat Californië bekend is dat deze kanker, geboortefouten of andere reproductieve schade veroorzaken.

RELATIEVE CONTRA-INDICATIES

Compressietherapie met het Game Ready GRPro 2.1-systeem mag uitsluitend onder toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:

- met een open wond in het betrokken gebied (de wond moet worden verbonden vóór het gebruik van Game Ready);
- met een acute, instabiele (onbehandelde) fractuur in het betrokken gebied;
- die jonger dan 18 zijn of die cognitieve stoornissen of communicatieproblemen hebben, ongeacht of dit tijdelijk van aard is (vanwege medicatie) of blijvend;
- met hartinsufficiëntie of congestief hartfalen (met hieraan verbonden oedeem in de extremiteiten of longen);
- met een plaatselijke instabiele huidaandoening (bijv. dermatitis, ligatuur van een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
- met erysipelas of een andere actieve infectie in het betrokken gebied.

Cryotherapie met het Game Ready GRPro 2.1-systeem mag uitsluitend onder toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:

- met ziekte van Raynaud of overgevoeligheid voor koude (koude-urticaria);
- met hypertensie of een extreem lage bloeddruk;
- met diabetes;
- met een aangetaste plaatselijke bloedsomloop of een neurologische aandoening (waaronder paralyse of plaatselijke aantasting ten gevolge van meerdere operatieve ingrepen) in het betrokken gebied;
- met een plaatselijke instabiele huidaandoening (bijv. dermatitis, ligatuur van een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
- met reumatoïde artritis in het betrokken gebied;
- die jonger dan 18 zijn of die cognitieve stoornissen of communicatieproblemen hebben, ongeacht of dit tijdelijk van aard is (vanwege medicatie) of blijvend.

BELANGRIJK

Stel het Game Ready-systeem bij gebruik van dit koelvest niet in op een hoge of middelhoge druk. LEES DEZE VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET GAME READY-SYSTEEM DOOR, INCLUSIEF DE INDICATIES, CONTRA-INDICATIES, AANDACHTSPUNTEN EN WAARSCHUWINGEN, VOORDAT U DIT PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT!

WAARSCHUWINGEN

- Houd u aan de adviezen van uw gezondheidszorgverlener betreffende de frequentie en duur van het gebruik.
- Onjuiste plaatsing of langdurig gebruik van het Game Ready-systeem kan leiden tot weefselbeschadiging. Tijdens de behandeling moeten patiënten de huid rondom het behandelde gebied of de vingers/tenen van de behandelde ledemaat in de gaten houden om te zien of zich een branderig gevoel, jeuk, toegenomen zwelling of pijn voordoet. Als een van deze tekenen zich voordoet, of veranderingen in het uiterlijk van de huid (zoals blaren, toegenomen roodheid, verkleuring of andere waarneembare veranderingen van de huid), worden patiënten geadviseerd om het gebruik te staken en een arts te raadplegen.
- Game Ready-zwachtels zijn niet steriel; niet rechtstreeks op open wonden, zweren, uitslag, infecties of hechtingen aanbrengen. De zwachtel kan over kleding of een verband heen worden aangebracht.

- Game Ready-zwachtels zijn verkrijgbaar in diverse configuraties, maar zijn niet bestemd voor alle mogelijke fysiologische toepassingen. Zo is de enkelzwachtel niet bestemd voor gebruik om de tenen en is de rugzwachtel niet bestemd voor gebruik in het buikgebied.

OPMERKINGEN

Breng de zwachtel gelijkmatig strak en nauw passend aan zonder knikken, die de lucht- en waterstroom kunnen belemmeren.

ONDERHOUD EN REINIGING

Voor dagelijks onderhoud en om schimmelvorming te minimaliseren verwijdert u de warmtewisselaar uit de hoes en veegt u hem af met een droge handdoek om eventueel gevormde condensatie te verwijderen. Keer de hoes binnenstebuiten en hang de hoes en de warmtewisselaar allebei op om overtollig vocht te laten wegvloeden. Voor gebruik bij meerdere patiënten kan zo nodig Sterifab® worden gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant om de overdracht van microben te minimaliseren.

Voor een langere levensduur verwijdert u de warmtewisselaar voorzichtig uit de hoes en keert u de hoes binnenstebuiten. Was de hoes met de hand of in een machine met koud water en een mild reinigingsmiddel, of met antibacteriële zeep. Ophangen om te drogen. Was de warmtewisselaar met de hand met warm water en een mild reinigingsmiddel; niet in een wasmachine wassen of in een droogtrommel plaatsen. Ophangen om te drogen.

GEMIDDELDE VERWACHTE LEVENSDUUR

De levensduur van hoezen en warmtewisselaars is sterk afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Zie het onderstaande overzicht om te bepalen wanneer het product moet worden vervangen.

Hoes

Licht gebruik (persoonlijk) 12 maanden

Matig gebruik..... 6 maanden

Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling) 3 maanden

Warmtewisselaar

Licht gebruik (persoonlijk) 24 maanden

Matig gebruik..... 18 maanden

Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling) 12 maanden

AFVOER

Voor de Game Ready®-zwachtels gelden geen speciale afvoervoorschriften.

GARANTIE-INFORMATIE

Hoes: Bij een fabricagefout kan de hoes binnen 7 dagen na aankoop worden geretourneerd.

Warmtewisselaar: 1 jaar na de aankoopdatum. Zie de bij de warmtewisselaar gevoegde garantiekaart.

CONTACT OPNEMEN

In de VS belt u de klantenservice van Game Ready op 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100). Buiten de VS kijkt u op www.gameready.com om de contactgegevens van de plaatselijke distributeur te vinden.

Een lijst met informatie over voor Game Ready-technologie verleende octrooien is te vinden op: www.gameready.com/patents.



Symbool voor “geassembleerd in” een bepaald land (XXXX)



Symbool voor “vervaardigd in” een bepaald land (XXXX)



 COOLSYSTEMS®, INC.
1800 Sutter Street, Suite 500
Concord, CA 94520, VS
1.888.GAMEREADEY +1.510.868.2100
www.gameready.com

©2016 CoolSystems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding van Game Ready-zwachtels
met dubbele werking

Koelvest onderdeelnr. 704528 rev. A



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
Nederland