


GAME
READY®

ATX®

FÖR ANVÄNDNING
TILLSAMMANS MED

GAME READY
GRPRO® 2.1-SYSTEM

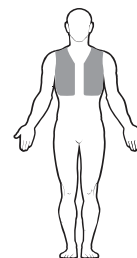

KYLVÄST

ANVÄNDARHANDBOK


SVENSKA

MONTERING

Värmeväxlaren passar inuti manschetten och levereras förmonterad. Om värmeväxlaren avlägsnas för att tvätta manschetten eller på grund av någon annan orsak, använd följande anvisningar för att återinföra värmeväxlaren in i manschetten.


1

Lägg manschetten helt öppen, plant och med den blåa sidan ned. De främre panelerna ska peka ifrån dig som visas på bilden.

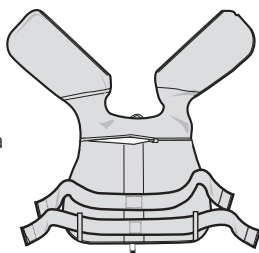

2

Placera värmeväxlaren i samma riktning med den blåa sidan ned.

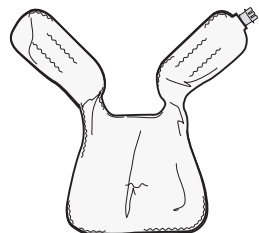

VARNING

Det är obligatoriskt att läsa och förstå hela Game Ready GRPro 2.1-användarhandboken innan användning av enheten. Underlåtenhet att följa driftanvisningarna kan resultera i allvarlig skada.




VIKTIGT

Läs samtliga indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar innan användning av denna produkt. Bevara detta dokument för referens i framtiden.

3

Öppna det tvärgående blixtlåset på manschettens baksida. För in värmeväxlaren in i manschetten under riktningssinpassning (blått till blått). Säkerställ att värmeväxlaren är inuti manschetten utan några vikningar eller veck som kan blockera vattenflödet genom värmeväxlarens kanaler. Stäng blixtlåset på baksidan. Kylvästen är nu klar att använda.

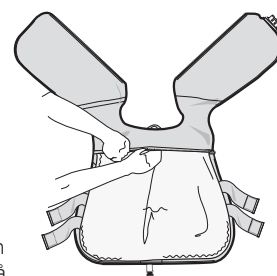

AVLÄGSNANDE AV VÄRMEVÄXLAREN


1. Koppla ifrån anslutningsslangen från kylvästen
2. Öppna blixtlåset på baksidan
3. Dra varsamt ut värmeväxlaren

FÖRVARING AV DIN KYLVÄST

Häng upp din kylväst på en bred hängare eller lägg den plant. Vik den inte eller lägg den i en trave då detta kan leda till veck på vätskekammaren och göra så att västen inte fungerar korrekt.

INSTÄLLNING AV KYLVÄSTEN

Innan du sätter på dig västen, observera ögleremmen på baksidan som går från blyxtlåset på ryggen ned till midjan. Remmarnas längd justeras och kontrolleras från denna plats på baksidan. Till en början kanske du vill placera den övre remmen så lågt som möjligt och sedan justera den till en bekväm passform. Remmarna kan överlappa något. Det kan krävas några försök innan du får den passform som du önskar.

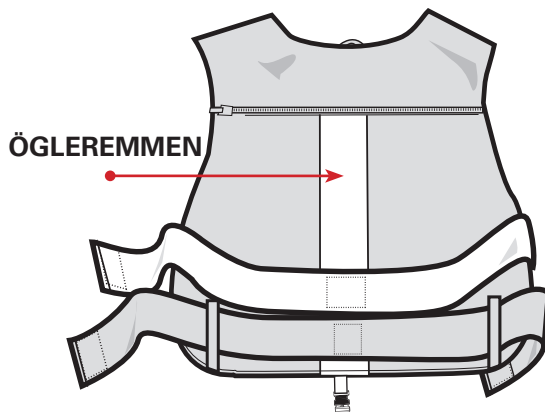

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Fyll kylvästen genom att utföra följande steg:

- Välj "Off" (av) ("No pressure" (inget tryck)) på GRPro 2.1-kontrollenheten
- Koppla fast anslutningsslangen till kontrollenheten och kylvästen
- Lägg kylvästen öppen och plan bredvid eller lägre än kontrollenheten (inte på kroppen)
- Kör systemet under 2 minuter

ANBRINGANDE AV KYLVÄSTEN



1 Sätt på kylvästen på kroppen precis som du skulle sätta på något annat ytterplagg. Dra upp blyxtlåset. De elastiska sidoremmarna ska vara fästade på sidorna för att enkelt kunna omjusteras.


2 Med hjälp av båda händerna håll i ändarna på de elastiska remmarna och anpassa västen varsamt så att den sitter åt på kroppen.

Det rekommenderas att de övre remmarna vinklas upp från baksidan till bröstorgans övre del, och inte rakt över under armarna. Detta kommer att förhindra att västen åker uppåt.


3 Fäst änden på anslutningsslangen till anslutningskontakten på västen genom att stadigt föra in de två delarna rakt in i varandra. Ett hörbart klickljud ska erfaras. Anslutningsslangen ska riktas så att frånkopplingsknappen riktas bort från din kropp.

Den valfria säkerhetsögleremmen kan användas för att drapera slangen från västens framsida till baksida, om så önskas.

4 För in den andra änden på anslutningsslangen i kontakten på kontrollenhetens ändpanel. För att frånkoppla slangen, tryck på den röda knappen och dra slangen rakt ut från kontrollenheten.

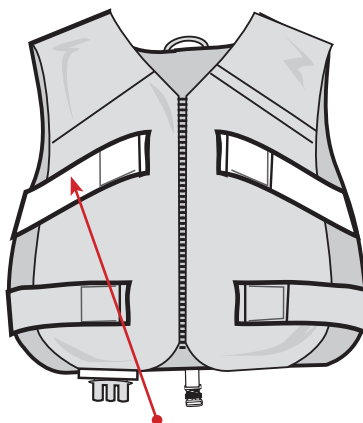

VINKLA UPPÅT

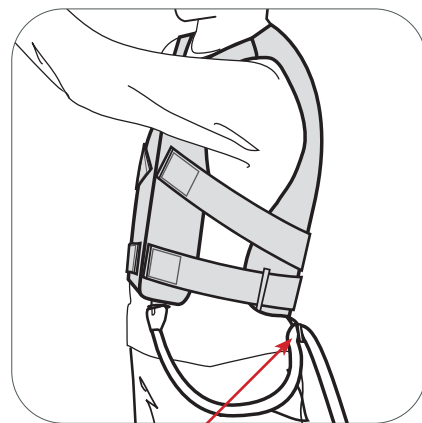

SÄKERHETSÖGLEREM



FÖR ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED GAME READY GRPRO 2.1-SYSTEM

ABSOLUTA KONTRAIKATIONER

Kompressionsbehandling med Game Ready GRPro 2.1-systemet eller någon annan kompressionsbehandlingsenhet ska inte användas på patienter:

- med akut flebit i det berörda området.
- med några aktuella kliniska tecken som tyder på djup ventrombos i det berörda området.
- med betydande arterioskleros eller annan ischemisk kärlsjukdom i det berörda området.
- med betydande riskfaktorer för eller nuvarande kliniska tecken på emboli (t.ex. lungemboli, hjärninfarkt, förmaksflimmer, endokardit, hjärtinfarkt eller ateromatöst emboliskt plack).
- med ett tillstånd (t.ex. karcinom) där ökad venös eller lymfatisk retur inte är önskvärd i den berörda extremiteten.
- med dekompenenserad hypertoni i det berörda området.

Kryoterapi med Game Ready GRPro 2.1-systemet eller någon annan kryoterapi-enhet ska inte användas på patienter:

- med betydande cirkulationsrubbingar i det berörda området (t.ex. genom tidigare köldskada, diabetes, arterioskleros eller ischemi).
- med känd blodyskrasi som inverkar på trombos (t.ex. paroxysmal kall hemoglobinuri, kryoglobulinemi, sicklecellsanemi, köldagglutinin i serum).

Varning! För att överensstämna med Kaliforniens proposition 65 har följande varning inkluderats: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända i delstaten Kalifornien för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktiva skador.

RELATIVA KONTRAIKATIONER

Kompressionsbehandling med Game Ready GRPro 2.1-systemet bör användas endast under uppsyn av en legitimerad praktiserande läkare på patienter:

- som har ett öppet sår i det berörda området (såret måste läggas om innan Game Ready används).
- som har en akut, instabil (obehandlad) fraktur i det berörda området.
- som är barn under 18 år eller patienter med kognitiva funktionshinder eller kommunikationshinder, vare sig tillfälliga (till följd av medicinering) eller permanenta.
- som har en hjärtinsufficiens eller hjärtsvikt (med associerat ödem i extremiteterna eller lungorna).
- som har en instabil lokal hudåkomma (t.ex. dermatit, venligerig, gangrän eller nytt hudtransplantat).
- som har erysipelas eller en annan aktiv infektion i det berörda området.

Kryoterapi med Game Ready GRPro 2.1-systemet bör användas endast under uppsyn av en legitimerad praktiserande läkare på patienter:

- som har Raynauds sjukdom eller överkänslighet mot kyla (köldurtikaria).
- som har hypertoni eller extremt lågt blodtryck.
- som har diabetes.
- som har nedsatt lokal cirkulation eller neurologiska störningar (inklusive förlamning eller lokala förändringar på grund av flera kirurgiska ingrepp) i det berörda området.
- som har en instabil lokal hudåkomma (t.ex. dermatit, venligerig, gangrän eller nytt hudtransplantat).
- som har reumatoid artrit i det berörda området.
- som är barn under 18 år eller patienter med kognitiva funktionshinder eller kommunikationshinder, vare sig tillfälliga (till följd av medicinering) eller permanenta.

VIKTIGT

Ställ inte in Game Ready-systemet för högt tryck eller medelhögt tryck under användning av kylvästen. LÄS HELA DENNA ANVÄNDARHANDBOK OCH GAME READY-SYSTEMETS ANVÄNDARHANDBOK INKLUSIVE INDIKATIONER, KONTRAIKATIONER, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT!

VARNINGAR

- Följ rekommendationerna från din läkare om hur ofta och hur länge du får använda produkten.
- Felaktig placering eller långvarig användning av Game Ready-systemet kan leda till vävnadsskador. Under behandlingens gång bör patienten övervaka huden runt behandlingsstället samt fingrar/tår på den behandlade extremiteten för varje brännande känsla, klåda, ökad svullnad eller smärta. Om något av dessa symtom uppträder eller om det uppstår några förändringar på huden (t.ex. blåsor, ökad rodnad, missfärgning, andra märkbara hudförändringar) bör patienten sluta med behandlingen och träffa en läkare.
- Game Ready-band är inte sterilt. Lägg dem inte direkt på öppna sår, skavsår, utslag, infektioner eller stygn. Bandet kan läggas över kläder eller förband.

- Game Ready-band finns i flera olika modeller, men är inte avsedda för alla möjliga fysiologiska användningsområden. Till exempel är vristbandet inte utformat för att användas på tårna och ryggbandet är inte avsett för användning på magen.

ANMÄRKNINGAR

Applicera bandet jämnt för en nära och tät passform och säkerställ att inga veck hindrar luft- eller vattenflödet.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

För daglig skötsel och för att minska bildningen av mögel, avlägsna värmväxlaren från manschetten och torka med en torr handduk för att ta bort kondensation som kan bildas. Vänd manschetten in och ut och häng upp både manschetten och värmväxlaren för att frigöra överflöd av fukt. Vid användning på flera patienter, använd Sterifab® vid behov enligt tillverkarens anvisningar för att minska överföring av mikrober.

Vid förlängd vård, avlägsna värmväxlaren varsamt från manschetten och vänd manschetten in och ut. Handtvätta eller maskintvätta manschetten i kallt vatten, med en mild tvättsåpa eller antibakteriell tvål. Häng upp för att torka. Handtvätta värmväxlaren med varmt vatten och mild tvättsåpa. Genomför inte maskintvätt eller placera i en torkmaskin. Häng upp för att torka.

GENOMSnittlig LIVSLÄNGD

Livslängden för manschetterna och värmeväxlarna kommer att variera mycket beroende på användningsfrekvensen. Se tabellen nedan för att fastställa när produkten ska bytas ut.

Manschett

Låg användning (personlig) 12 månader

Medelhög användning 6 månader

Hög användning (klinik- eller utbildningsinrättning) 3 månader

Värmeväxlare

Låg användning (personlig) 24 månader

Medelhög användning 18 månader

Hög användning (klinik- eller utbildningsinrättning) 12 månader

KASSERING

Det finns inga speciella avfallshanteringskrav för Game Ready®-banden.

GARANTIINFORMATION

Manschett: I händelse av tillverkningsdefekt kan manschetten returneras inom 7 dagar från inköpstillfället.

Värmeväxlare: 1 år från inköpsdatum. Se garantikortet som inkluderats med värmeväxlaren.

KONTAKTA OSS

I USA ring Game Ready kundtjänst på 1 (888) 426 3732 (+1 (510) 868 2100). Utanför USA, besök www.gameready.com för att hitta kontaktinformation till din lokala återförsäljare.

En lista över aktuella patent som omfattar Game Ready-teknik finns på: www.gameready.com/patents.



Symbol för "monterad" i ett specifikt land (XXXX).



Symbol för "tillverkad" i ett specifikt land (XXXX).



 COOLSYSTEMS®, INC.
1800 Sutter Street, Suite 500
Concord, CA 94520 USA
1.888.GameReady (+1 510 868 2100)
www.gameready.com

©2016 CoolSystems, Inc. Med ensamrätt
Användarhandbok för Game Ready dubbelverkande band

Kylväst PN 704522 Rev A



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
Nederländerna